

VAGHEGGI
PHYTOSMETICI



VGH PHYTOTECH PREX PLUS 8



Best Medical Beauty Equipment Brand

VAGHEGGI
PHYTOSMETICI

VGH PREX PLUS 8

ACTION DRAINANTE ET REVITALISANTE





VGH PREX PLUS 8

VGH PreX Plus 8 est un équipement conçu pour contrer les problèmes de rétention d'eau, atténuer les imperfections dues à la cellulite* et remodeler le corps.

Le Press Massage contribue à la restauration de la fonction veino-lymphatique, favorisant la circulation périphérique. Il a une activité drainante, réduisant les gonflements et les tensions musculaires.

VGH PreX Plus 8 effectue un travail ciblé sur différents problèmes esthétiques et sur toutes les zones du corps, grâce à des programmes dédiés pour agir sur les imperfections de la cellulite, de la graisse, du relâchement cutané et des tissus sous-jacents.

TECHNOLOGIE SILENCIEUSE Moteur de nouvelle génération qui rend l'appareil plus silencieux et plus efficace dans le temps avec une durée de 2 500 heures égale à 5 000 traitements.

Pressothérapie péristaltique
Comme une vague, elle enveloppe uniformément le membre de bas en haut, favorisant l'écoulement sanguin et lymphatique et la réabsorption des liquides des tissus dans les vaisseaux.

Action drainante et revitalisante

Le Press Massage contribue à la restauration de la fonction lymphatique veineUTILISER, favorisant la circulation périphérique.

Il a une activité drainante, réduisant les gonflements et les tensions musculaires.

Il a un effet détoxifiant et revitalisant important, améliore l'oxygénation des tissus et prévient la formation des imperfections de la cellulite.

Ce traitement est particulièrement relaxant et génère une sensation de bien-être et de légèreté.

8 SECTEURS

Les jambières pour le Press Massage sont divisées en pieds, jambes, culotte avec ouverture des ganglions lymphatiques, abdomen / hanches.

Les jambières sont réglables en hauteur et sur le périmètre de la jambe ou des bras, avec des chambres à air à secteurs interchangeables.



LES JAMBES ET LE SAC DE CEINTURE



01



02



03



04



05

JAMBE INSPECTABLE

DRAP LAVABLE



ACCES FACILE



**SECTEURS
INTERCHANGEABLES**



LE PLUS TECHNOLOGIE ET CONFORT

- MOTEUR DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
- MÉCANISME D'ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE

- REGLAGE DE LA PRESSION EN mmHg
- RÉGULATION DES TEMPS DE PRESSION POUR UN SEUL SECTEUR
- CONTRÔLE AUTOMATIQUE DES SECTEURS
- AFFICHAGE DE LA SÉQUENCE DE TRAVAIL SUR L'ÉCRAN
- MÉMORISATION DU PROGRAMME PERSONNALISÉ


12 PROGRAMMES POUR LES JAMBES

Des traitements à 8 secteurs qui agissent sur les membres inférieurs. Programmes diversifiés en fonction des besoins et des problèmes individuels du client.

TECHNOLOGIE SILENCIEUSE



ACCESSOIRES INCLUS ET EN OPTION

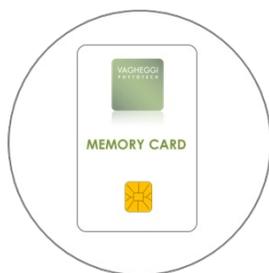

5 CARTE MÉMOIRE



JAMBIÈRE 8 SECTEURS



OPTION

BRAS / CBRÜS

PROGRAMMES PRÉPARÉS POUR LES JAMBES, Pression normale ou pulsée

12 programmes de jambes différents sont disponibles, il est possible de changer le type de pression Normal ou Pulsé en agissant sur la flèche latérale en bas à droite.



PROGRAMMES PRÉÉTABLIS JAMBES

1) LEG PROGRAM 1: Classic Peristaltic

Traitement péristaltique ascendant, avec compression toujours dans un sens comme dans le drainage lymphatique manuel. Il favorise l'écoulement du sang et de la lymphe en améliorant la situation de stagnation des tissus à l'état initial.

2) LEG PROGRAM 2: Classic Peristaltic Intense

Traitement péristaltique ascendant, avec compression toujours dans un sens comme dans le drainage lymphatique manuel. Il favorise l'écoulement du sang et de la lymphe en améliorant la situation de stagnation des tissus à l'état important.

3) LEG PROGRAM 3: Riding Breeches

Traitement péristaltique ascendant, favorise l'écoulement sanguin et lymphatique. Indiqué dans toutes les situations où l'imperfection s'étend à la région latérale des cuisses et à un aspect en goutte d'huile des fesses, se présentant sous une forme compacte.

4) LEG PROGRAM 4 Riding breeches

Traitement péristaltique ascendant, favorise l'écoulement sanguin et lymphatique. Indiqué dans toutes les situations où l'imperfection s'étend à la région latérale des cuisses et à un aspect en goutte d'huile des fesses.

5) LEG PROGRAM 5 Compact Thighs

Traitement péristaltique ascendant, favorise l'écoulement sanguin et lymphatique. Indiqué dans toutes les situations où l'imperfection se produit dans la région interne des cuisses vers l'aîne et dans la région postérieure des cuisses, se présentant sous une forme compacte.

6) LEG PROGRAM 6 Soft Tighs

Traitement péristaltique ascendant, favorise l'écoulement sanguin et lymphatique. Indiqué dans toutes les situations où l'imperfection se produit dans la région interne des cuisses vers l'aîne et dans la région postérieure des cuisses, configurant dans la position debout la forme classique des cuisses en cascade, se présentant dans une forme souple.

PROGRAMMES PRÉÉTABLIS JAMBES

7) LEG PROGRAM 7: Edematous Thighs

Traitement péristaltique ascendant, favorise l'écoulement sanguin et lymphatique. Indiqué dans les situations d'augmentation significative des fluides dans les tissus. Souvent l'imperfection peut présenter le signe de la peau d'orange et une forme molle.

8) LEG PROGRAM 8: Abdomen

Traitement péristaltique ascendant, favorise l'écoulement du sang et de la lymphe. Convient dans les situations où l'imperfection est particulièrement localisée à la région abdominale avec un abdomen proéminent.

9) SWELLED, HEAVY LEGS, POST PREGNANCY

Traitement péristaltique ascendant, favorise l'écoulement sanguin et lymphatique. Indiqué dans les situations où le sujet se plaint d'une sensation mal définie de lourdeur et de gonflement des jambes, non dictée par une situation pathologique spécifique, mais par une souffrance passagère. Également utile après une grossesse ou une chirurgie abdominale.

10) LEG PROGRAM 10: SOFT LEGS

Traitement péristaltique ascendant, favorise l'écoulement du sang et de la lymphe. Idéal dans les situations où l'imperfection se produit non seulement dans les cuisses mais aussi dans la région des mollets sous une forme douce.

11) LEGS PROGRAM 11: Compact Legs

Traitement péristaltique ascendant, favorise l'écoulement sanguin et lymphatique, la réduction de l'espace entre le système circulatoire et le tissu adipeux favorise la mobilisation des graisses. idéal dans les situations où l'imperfection se produit non seulement dans les cuisses mais aussi dans la région des mollets sous une forme compacte.

12) LEG PROGRAM 12 Edematous Legs

Traitement péristaltique ascendant, favorise l'écoulement sanguin et lymphatique. Indiqué dans les situations d'augmentation significative des fluides dans les tissus. Souvent l'imperfection peut présenter le signe de la peau d'orange et une forme molle en plus de la cuisse aussi à la région du mollet

LES PROGRAMMES PRÉÉTABLIS DU HAUT DU CORPS

1) ARM PROGRAM 1: Classic soft Peristaltic

Traitement péristaltique ascendant, avec compression toujours dans un sens comme dans le drainage lymphatique manuel. Il favorise l'écoulement sanguin et lymphatique en améliorant les situations de stagnation tissulaire à l'état initial.

2) ARM PROGRAM 2: Intense Classic Peristaltic

Traitement péristaltique ascendant, avec compression toujours dans un sens comme dans le drainage lymphatique manuel. Il favorise l'écoulement du sang et de la lymphe en améliorant les situations de stagnation importante des tissus.

3) ARM PROGRAM 3: Heavy Swollen Arms

Traitement péristaltique ascendant, avec compression toujours dans un sens comme dans le drainage lymphatique manuel. Il favorise l'écoulement sanguin et lymphatique en améliorant les situations de stagnation tissulaire. Indiqué dans les situations où le sujet se plaint d'une sensation de lourdeur et de gonflement des bras en général, non dictée par une situation pathologique spécifique, mais par une souffrance momentanée.

4) ARM PROGRAM 4: Special Dren

Traitement péristaltique ascendant, avec compression toujours dans un sens comme dans le drainage lymphatique manuel. Il favorise l'écoulement sanguin et lymphatique en améliorant les situations de stagnation tissulaire importante.

Le programme de contrôle des secteurs se trouve dans les réglages (premier écran)
Programme de contrôle de la fonctionnalité des différents secteurs, à réaliser avec les différents segments verrouillés eux-mêmes.



PROGRAMMES – SUR MESURE

ÉCRAN DE MASSAGE PNEUMATIQUE DES JAMBES



F3





F4



MODIFIER LES PARAMÈTRES

Appuyez sur le point du corps où vous souhaitez modifier la valeur.

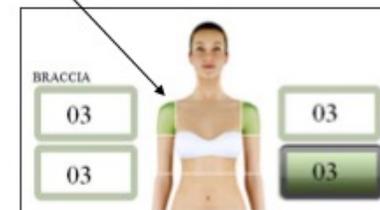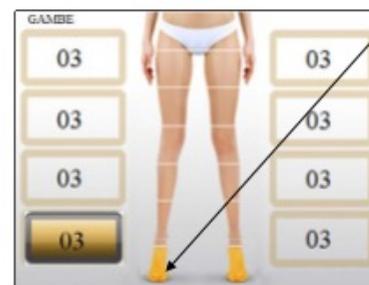

utilisez les touches + et - pour modifier la valeur.

Les temps de maintien sont exprimés en secondes, les valeurs admissibles sont comprises entre 0 et 15.

La valeur 0 implique que le secteur sera sauté pendant l'exécution du programme.

Il sera possible de modifier les paramètres suivants :

- TIME** : durée totale du traitement
- LEG PRESSURE**: pression exercée sur tous les secteurs, ex
- PAUSE**: pause à la fin du cycle exprimée en secondes



PROGRAMMES - CONTRÔLE DU SECTEUR

CONTRÔLE DU SECTEUR

Si, pendant le traitement, vous soulignez la difficulté d'un secteur à atteindre la pression et à passer au suivant, il est conseillé de vérifier les secteurs en accédant au menu REGLAGES



PRODUITS RECOMMANDÉS POUR PREX PLUS 8



Ligne Thema:
Purifying Body Scrub



Ligne Sinecell:
Scrub Cellulite
Cellulite Massage Serum
Reducing Massage Serum
Cellulite Strips
Reducing Thermal Strips
Reducing Cellulite Mud



Ligne Fuoco Plus:
Intensive Concentrate



Ligne Sikelia:
Toning Body Concentrate
Stretchmarks Concentrate
Toning Body Concentrate 50+

THEMA & PREX PLUS 8

	DETOX PROTOCOL
ETAPE 1	PREX PLUS 8 UTILISER: PURIFYNG BODY SCRUB (MASSAGE, 20' POSE, RINSE OFF)
ETAPE 2	ENDOMASSAGE UTILISER: SIKELIA MASSAGE CREAM

SIKELIA & PREX PLUS 8

	TONING PROTOCOL	TONING & STRETCH MARKS PROTOCOL	TONING & REDUCING PROTOCOL
ETAPE 1	Manual reactivation massage UTILISER: SIKELIA MESSAGE CREAM	FUOCO PLUS ULTRA SMOOTHING GEL (Apply locally, seal in plastic and leave on for 10 ', then remove)	Manual reactivation massage UTILISER: SINECELL REDUCING MESSAGE SERUM
ETAPE 2	PREX PLUS 8 UTILISER: SIKELIA TONING BODY CONCENTRATE	Manual reactivation massage UTILISER: SIKELIA CREAM MESSAGE	PREX PLUS 8 UTILISER: SIKELIA TONING BODY CONCENTRATE 50+ (apply the vial on the area to be treated and massage. Wrap in cartene and leave on, then rinse off)
ETAPE 3	SIKELIA TONING GEL CREAM	PREX PLUS 8 UTILISER: SIKELIA STRETCH MARKS CONCENTRATE	SIKELIA BODY SHAPING BUTTER 50+
ETAPE 4		SIKELIA STRETCH MARKS CREAM	

SINECELL & PREX PLUS 8

	DRAINING PROTOCOL	CELLULITE PROTOCOL	REDUCING PROTOCOL
ETAPE 1	<p>PREX PLUS 8 UTILISER: SCRUB CELLULITE (application and massage on the whole body or locally on areas to be treated, emulsify the product with water and leave on with cartene, remove the product)</p>	<p>SINECELL CELLULITE MASSAGE .SERUM</p>	<p>SINECELL REDUCING MASSAGE SERUM</p>
ETAPE 2	<p>SINECELL CELLULITE MASSAGE SERUM</p>	<p>PREX PLUS 8 UTILISER: SINECELL CELLULITE STRIPS (apply the bandages, leave on and massage the product residue) OR REDUCING CELLULITE MUD (apply the bandages, leave on and massage the product residue)</p>	<p>PREX PLUS 8 UTILISER: SINECELL THERMO REDUCING STRIPS (apply the bandages, leave on and massage the product residue) OR REDUCING CELLULITE MUD (apply the bandages, leave on and massage the product residue)</p>
ETAPE 3	<p>SINECELL REDUCING CELLULITE CREAM</p>	<p>SINECELL REDUCING CELLULITE CREAM</p>	<p>SINECELL REDUCING CELLULITE CREAM</p>

FUOCO PLUS & TOTAL BODY

	REDUCING PROTOCOL
ETAPE 1	PREX PLUS 8 UTILISER: FUOCO PLUS INTENSIVE CONCENTRATE
ETAPE 2	FUOCO PLUS DIORITI OIL

www.tuv.com
ID 9105082302



ISO 9001:2015

Rappresenta la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità, riconosciuta a livello internazionale, garantisce che le apparecchiature rispettino il sistema di gestione previsto dalla norma per la progettazione, la produzione, la vendita, lo sviluppo e la ricerca.

www.tuv.com
ID 9105082302



EN ISO 13485:2012

La certificazione relativa al Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi Medici, è uno standard di riferimento di Qualità nell'ambito delle procedure regolamentari che disciplinano la progettazione, la produzione e l'immissione in commercio dei Dispositivi Medici.

www.tuv.com
ID 9105082302



OHSAS 18001:2007

Relativa allo standard per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.

VAGHEGGI
PHYTOSMETICI



VGH PHYTOTECH PREX PLUS 8



Best Medical Beauty Equipment Brand