

VAGHEGGI  
PHYTOSMETICI



# VGH PHYTOTECH FACE PLUS



*Best Medical Beauty Equipment Brand*

## **VGH FACE PLUS**

*TECHNOLOGIE INTÉGRÉE POUR LE  
VISAGE*

- Contrôle de l'hydratation
- Brosses de gommage
- Spatule ultrasons 25KHz
- Radiofréquence
- Électroporation



## VGH FACE PLUS (5 fonctions)

**Contrôle de l'hydratation, Brosses de gommage, Spatule ultrasons  
25KHz, Radiofréquence, Electroporation**

**VGH Face Plus** est le système créé pour prendre soin des imperfections du visage, du cou et du décolleté une technologie qui contient les fonctions les plus innovantes pour les traitements de nettoyage, d'oxygénation, de tonification et de régénération.

Avec VGH Face Plus, vous pouvez choisir entre deux systèmes de travail distincts, partant de l'imperfection pour arriver à la solution.



# FACE PLUS: FONCTIONS

1. **Traitement guidé**, dans lequel l'esthéticienne identifie l'imperfection et l'équipement l'accompagne dans toutes les phases, de l'analyse aux étapes du traitement, en indiquant les technologies les plus appropriées ;

2. **Traitement manuel**, par lequel, après avoir déterminé le type d'imperfection, l'esthéticienne choisit de manière autonome le traitement, en pouvant toujours compter, si nécessaire, sur le soutien de l'équipement qui, sur la base des caractéristiques de l'imperfection, propose la solution ad hoc.

## AVANTAGES TECHNIQUES

UNE TECHNOLOGIE COMPLÈTE POUR LE VISAGE

UNE APPROCHE DE POINTE ET EFFICACE QUI RÉPOND AUX BESOINS DES CLIENTS D'AUJOURD'HUI

ÉCRAN TACTILE

LOGICIEL FACILE À UTILISER.

INTEGRÉ (s'intègre parfaitement à tous les protocoles cosmétiques Vagheggi

**Contrôle de l'hydratation**



**Scrub brushes**



**Ultrasound**



**Electroporation**



**Radiofréquence**



# 5 FONCTIONS EN 1 TECHNOLOGIE

**Contrôle guidé de l'hydratation :**  
première étape d'un bilan de santé de la peau



**BRUSHES: ESSENTIELS**  
Synergies avec tous les produits pour le visage pour mettre en œuvre la méthode.

**RADIOFRÉQUENCE EFFET LIFTING NATUREL**  
En élevant la température du tissu conjonctif et en activant les fibroblastes par la chaleur pour produire du nouveau collagène et de la nouvelle élastine, elle réduit les rides et les signes du vieillissement.



**ANTI-AGING EFFECTIVENESS US 25Kh**  
Ondes ultrasons biodynamiques  
Il combine les micro vibrations ultrasoniques et l'hyperémie endogène dans le but de régénérer, tonifier et élastifier les zones cutanées traitées.



**ELECTROPORATION** en matière d'administration transdermique : des courants spéciaux de forme carrée et de fréquences différentes, qui ouvrent des "canaux aqueux" dans la membrane cellulaire, permettant un transport plus efficace des principes actifs. Technique absolument indolore et non invasive.

# CONTRÔLE DE L'HYDRATATION : Contrôle

La fonction "contrôle de l'hydratation" permet de détecter le pourcentage d'hydratation du visage en exploitant un léger passage de courant, ce qui permet de faire un premier bilan avant traitement. **Il s'agit d'un courant galvanique, continu et sur la base de l'impédance qu'il trouve (le temps qu'il met pour passer d'un pôle à l'autre), la quantité d'eau présente dans la peau est calculée.**

## Notes d'utilisation :

PEAU TRÈS DÉHYDRATÉE : valeurs 10-20 %.

PEAU DÉHYDRATÉE : valeurs 20-30 % PEAU NORMALE : valeurs 30-60 %.

Suggérer au client de faire un nettoyage complet à la maison, afin d'avoir une valeur véridique lors du contrôle.

N'oubliez pas de donner l'électrode polaire au client (enveloppée dans un cleanex humide / éponge humide pour une meilleure conduction).

Suivez l'assistant (également sonore) pour effectuer les détections.



## SCHEMATA DI LAVORO CONTROLLO IDRATAZIONE



F1



F2

# SCRUB BRUSHES: Exfoliating action

Le brossage effectue une action de nettoyage, assure l'élimination de la couche cornée superficielle, en éliminant les dépôts d'impuretés. Il prépare la partie à traiter à recevoir les bénéfices des traitements ultérieurs et augmente la pénétration des principes actifs.

**Notes d'utilisation : puissance de départ 30**

-  Parfait pour nettoyer les petites zones difficiles
-  Brosse rigide à utiliser sur les peaux normales à sensibles
-  Brosse lourde à utiliser sur les peaux grasses et épaisses
-  Pierre ponce adaptée aux zones du corps présentant des épaissements




Réglez la vitesse de rotation des brosses en fonction du type de peau et de la zone traitée.

A utiliser sur le corps uniquement, pour les zones épaisses (coudes, genoux, talons)

# SCRUB BRUSHES: Exfoliating action

FONCTION	POWER PRE-SET	DOUBLE ROTATION
Cleansing	50	X
Peeling	75	
Relaxing	20	
Esfoliation (pumice)	20	
Delicate Areas	45	X

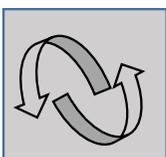

- Dans la fonction nettoyage et zones délicates, il est possible de modifier le temps d'inversion de la rotation, une fois que l'on a appuyé sur le bouton de démarrage.
- Avec le bouton mis en évidence ici, vous pouvez toujours changer le type de rotation (droite, gauche ou double) dans chaque fonction préétablie.

**NOTES DE TUILISATION : Mouiller les poils en trempant la brosse dans le produit nettoyant (lait, mousse, crème etc.) ou en cas de peeling, mouiller les étoiles avec de l'eau avant de procéder à l'utilisation de la brosse sur le produit de peeling, qui a été préalablement appliqué sur le visage .**

## PRODUITS RECOMMANDÉS

**Les produits nettoyants des lignes visage de Vagheggi**

**Correspondance parfaite :**

**Balance - Spongy mask**

**White Moon - Brightening mineral mask.**

# PRODUITS RECOMMANDÉS POUR LES BROSSES



**Rehydra**  
Moisturising Cleansing Milk



**Emozioni PLUS**  
Cleansing Cream



**Balance**  
Exfoliating Gel

# PRODUITS RECOMMANDÉS POUR LES BROSSES



## White Moon

Cleansing Toner



## Lime

Make-up remover micellair  
Cleanser Vitamin C



## Bio+

Cleansing Toner

# PRODUITS RECOMMANDÉS POUR LES BROSSES



**Delay Infinity**  
Cleansing Milk



**Intense**  
Complete Cleanser face and eyes



**75.15**  
Cleansing Cream

# ULTRASOUND 25 kHz

## PROGRAMMES GUIDÉS

Les différentes fréquences utilisées lui permettent d'exercer une action régénérante, tonifiante, élastifiante avec d'excellents résultats sur tous les types de peau grâce à 14 programmes spécifiques.

Si vous souhaitez utiliser une seule énergie dans le programme, il suffit de réinitialiser la puissance de référence.

**NE PAS DÉPASSER 25 MINUTES TOTALES DE TRAITEMENT PAR ULTRASONS (comme indiqué dans le manuel)**



	PROGRAMME	STAGE NO.	DESCRIPTION
1	OILY SKIN	1	INTENSE PEELING
		2	HYPER-SMOOTHING MASSAGE+DELIVERY
		3	VIBROMASSAGE STAGE
2	DEHYDRATED/DRY SKIN	1	SOFT PEELING
		2	HYPER-SMOOTHING MASSAGE+DELIVERY STAGE
		3	STIMULATING VIBROMASSAGE STAGE
3	SENSITIVE SKIN	1	MEDIUM PEELING
		2	HYPER-SMOOTHING MASSAGE+DELIVERY
		3	DRAINING VIBROMASSAGE
4	OXYGEN-DEPRIVED SKIN	1	INTENSE PEELING
		2	STIMULATING VIBROMASSAGE
		3	HYPER-SMOOTHING MASSAGE
5	OXYGENATING	1	INTENSE PEELING
		2	STIMULATING MASSAGE + DELIVERY
		3	DELIVERY
6	WRINKLES	1	MEDIUM PEELING
		2	HYPER-SMOOTHING MASSAGE+DELIVERY
		3	DELIVERY
7	SKIN DARK SPOTS	1	MEDIUM PEELING
		2	HYPER-SMOOTHING MASSAGE
		3	STIMULATING MASSAGE + DELIVERY
8	BIODYNAMIC FIRMING	1	MEDIUM PEELING
		2	HYPER-SMOOTHING MASSAGE
		3	STIMULATING MASSAGE + DELIVERY
11	SOFT PEELING		
12	MEDIUM PEELING		
13	INTENSE PEELING		
14	GALVANIC CURRENT DELIVERY		UTILISER SPECIFIC SERUM/PRODUCT

# ULTRASOUND 25 kHz: deep cleaning

## PHASE 1 – FOLLICULAR CLEANING/ PEELING

Ce type de programme combine les micro-vibrations ultrasons et l'hyperémie endogène permettant de régénérer, de tonifier et de donner de l'élasticité à la peau. Les capacités porteUTILISERS de l'ionophorèse (spatule) peuvent également être utilisées ensemble ou séparément.

Action de nettoyage en profondeur (nettoyage folliculaire) et pénétration des principes actifs. Il combine l'effet des ultrasons avec la vibration exercée par la spatule pour réaliser un peeling mécanique et des traitements du visage.

### DÉFINITION

Les ultrasons sont des ondes mécaniques battantes (qui oscillent quelques dizaines de milliers de fois par seconde, et qui nettoie la peau en évitant l'essorage. La vibration évapore les molécules d'eau, favorisant la libération des pores.

### 3 INTENSITÉ DE PEELING :

DOUX  
MOYEN  
INTENSE




Comment utiliser la tête (spatule)

### COME UTILIZZARE IL MANIPOLO ULTRASUONO

tip of the spatula facing down to facilitate exfoliation in phase 1 of peeling

PHASE

1

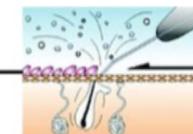

# ULTRASOUND 25 kHz: deep cleaning

TOUJOURS UTILISER LA PÉDALE, sinon il n'y a pas d'émission d'ultrasons.

Pendant l'utilisation, la spatule doit toujours être en mouvement et ne pas être utilisée verticalement pour éviter les brûlures désagréables dues à la chaleur émise par les ultrasons.

Prévenir la cliente qu'en cas de sensation de chaleur excessive, elle doit avertir l'opérateur qui diminuera en conséquence les niveaux de puissance fournis.

## Notes d'utilisation :

Puissance de face recommandée 50 -60% (après 25-30% vous voyez des vibrations sur une goutte d'eau).

La puissance doit être ajustée en fonction de la sensibilité du client.

Utilisez la pièce à main d'une main, avec l'autre glissez autour de la zone de travail avec du coton ou une brosse mouillée de tonique ou d'eau.

SÉQUENCES D'UTILISATION DE LA PIÈCE À MAIN DANS LES TRAITEMENTS DE PEELING DOUX, DE PEELING MOYEN, DE PEELING INTENSE



SÉQUENCE D'UTILISATION DE LA PIÈCE À MAIN DANS LES TRAITEMENTS DE VIBROMASSAGE DRAINANT ET DE VIBROMASSAGE STIMULANT



SÉQUENCE D'UTILISATION DES PIÈCES À MAIN DANS LES TRAITEMENTS DE MASSAGE HYPERDISTENSIF + VÉHICULATION OU DE VÉHICULATION PAR COURANT GALVANIQUE UNIQUEMENT



**CONTRE-INDICATIONS : voir le manuel**

# PRODUITS RECOMMANDÉS POUR LE PEELING



**Rehydra**  
Bamboo Exfoliating Gel



**Emozioni PLUS**  
Enzymatic Exfoliator



**Balance**  
Exfoliating Gel



**White Moon**  
Fizzy mask

# ULTRASOUND 25 kHz: Transmission des produits VAGHEGGI par JANOPHORÈSE

## PHASE 2 - IONOPHORESIS

En utilisant la pièce à main en sens inverse (voir image), il est également possible d'effectuer une Ionophorèse.

L'ionophorèse est le "voyage des ions ». (courant galvanique, il suit une ligne fixe à fréquence constante et est unidirectionnel), cela signifie que nous pouvons ainsi véhiculer des cosmétiques chargés positivement et permettre aux substances actives qu'ils contiennent de mieux pénétrer.

Pointe de la spatule tournée vers le haut (spatule plate sur le visage) pour faciliter le glissement du vibromassage et de la véhiculation.

PHASE 2



**L'électrode polaire doit être remise au client pour fermer le circuit.**

# PRODUITS RECOMMANDÉS POUR LA JANOPHORÈSE



**Rehydra**  
Moisturizing Toning Lotion  
Intensive Mousturising Vial



**Emozioni PLUS**  
Face Concentrate



**Balance**  
Vials Concentrate



**White Moon**  
Smoothing Concentrated Drops

VAGHEGGI  
PHYTICOSMETICI

# PRODUITS RECOMMANDÉS POUR LA JANOPHORÈSE



**Delay Infinity**  
Face Mask



**Intense**  
Shock concentrate



**75.15**  
Gel-like Make




**Bio+**  
Antioxidant Face Essence  
Redensifying Face Essence

# ULTRASUONI 25 kHz: vibro massage

## PHASE 3 - VIBROMASSAGE

En utilisant la pièce à main en sens inverse (voir image), il est également possible d'effectuer uniquement un massage vibratoire avec différentes actions :

- Stimulation
- Drainant
- Relaxant
- Hyper relaxant

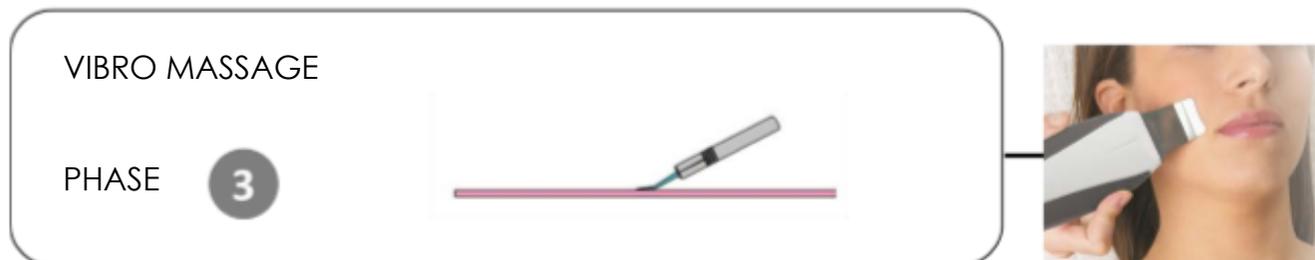

VAGHEGGI  
PHYTOSMETICI

# PRODUITS RECOMMANDÉS POUR LE VIBRO MASSAGE



## Rehydra

Day Moisturising Cream



## Emozioni PLUS

Face massage  
Cocooning Cream



## Balance

Matifying Cream

# PRODUITS RECOMMANDÉS POUR LE VIBRO MASSAGE



## White Moon

Protective Brightening Emulsion



## Bio+

Vitamin C Face Massage

Vitamin C Fluid

Vitamin C Cream



## Bio+

Face massage

Nourishing Face Essence

# PRODUITS RECOMMANDÉS POUR LE VIBRO MASSAGE



## **Delay Infinity**

Face Massage

Day Cream



## **Intense**

Deep facial massage

T zone face mask



## **75.15**

**Gel-like Mask**

Smoothing Day Cream

# ELECTROPORATION : Intensification de l'action

L'électroporation par l'émission d'impulsions électriques, elle permet d'ouvrir des canaux dans le derme pour véhiculer en profondeur tout type de produit hydrophile appliqué, même avec un poids moléculaire élevé, choisi en fonction de l'imperfection à traiter.

**COURANT GALVANIQUE À ONDE CARRÉE, UNIDIRECTIONNEL MAIS NON CONTINU.**


## **ACTION :**

L'impulsion électrique émise stimule l'ouverture des canaux aqueux, appelés aussi "électropores", permettant ainsi le passage des molécules (seringue virtuelle).

Il s'agit d'une altération transitoire de la membrane cellulaire, qui revient ensuite comme avant.

**CONTRE-INDICATIONS (voir le manuel)**

**N'oubliez pas de faire signer au client le consentement éclairé.**

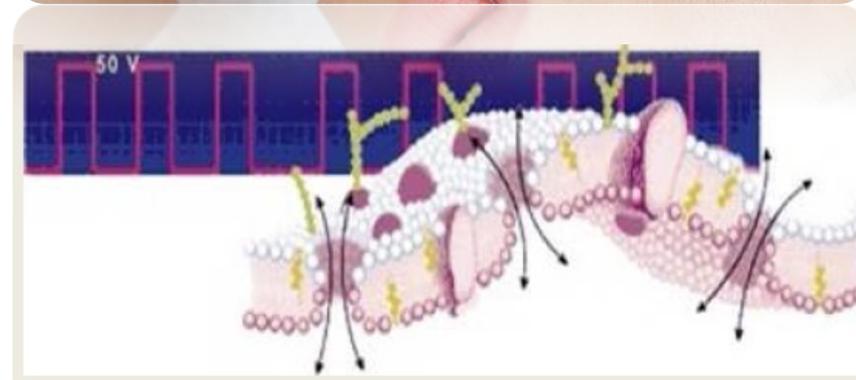

Membrane cellulaire après électroporation

# ELECTROPORATION : Intensification de l'action

## HOW TO UTILISER

### MODALITA' DI ESECUZIONE



SEQUENCE	ACTION
1	Mouillez la pochette éponge jaune dans l'eau (retirez-la du câble) et positionnez-la sous l'épaule.
2	Remplir le flacon spécial avec le produit spécifique (émulsionner 1:1 avec un toner)
3	Visser le flacon sur la pièce à main d'électroporation (câble noir)
4	Essorez le produit de la sphère et appliquez une fine couche sur la zone à traiter pour qu'elle glisse mieux.
5	Commencez le traitement, en essayant de tenir la pièce à main perpendiculairement tout le temps pour aider le sérum à sortir. Essorez le produit. Le client ne doit pas ressentir de choc, si c'est le cas, la puissance est trop élevée et doit être diminuée.

# ELECTROPORATION : Intensification de l'action

## DURÉE RECOMMANDÉE

20 à 30 minutes de traitement sur l'ensemble du visage car ce temps crée une vasodilatation et rend les cellules épithéliales perméables. Il est conseillé de diviser le visage en 2 parties (droite 10 minutes / gauche 10 minutes). Le mouvement doit être lent et limité (environ 2 cm) pour une utilisation correcte.

## PUISSANCE RECOMMANDÉE

A moduler en fonction de la tolérance du client. Sur le visage on commence avec une puissance de 6-7 (durée du traitement 10-15 minutes), pendant le traitement on peut augmenter la puissance en fonction de la sensibilité du client) (VA DE ZERO À 100)

## PROGRAMMES (2 TYPES)

Hydratation (plus superficiel)

Anti-âge (plus profond)



ÉCRAN DE TRAVAIL POUR L'ÉLECTROPORATION

# PRODUITS RECOMMANDÉS POUR L'ELECTROPORATION (1: 1 diluer avec Rehydra Moisturizing Toning Lotion)



## Rehydra

Moisturising Toning Lotion

Intensive Moisturising Vial



## Emozioni PLUS

Lenitive Essence Mist

Face Concentrate



## Balance

Vials Concentrate

# PRODUITS RECOMMANDÉS POUR L'ELECTROPORATION (1: 1 diluer avec Rehydra Moisturizing Toning Lotion)



## White Moon

Gocce Concentrate Leviganti



## Bio+

Mineralizzante Zinco+Arancio



## Bio+

Essenza Viso Antiossidante

Essenza Viso Ridensificante

# PRODUITS RECOMMANDÉS POUR L'ELECTROPORATION (1: 1 diluer avec Rehydra Moisturizing Toning Lotion)



**Delay Infinity**  
Flawless Face



**Intense**  
Shock Concentrate



**75.15**  
Precius Toner

## RADIOFREQUENCE : action tonifiante

La **radiofréquence** est basée sur l'utilisation de l'énergie électromagnétique qui est transformée en chaleur car il se produit une oscillation moléculaire qui crée une diathermie dans les tissus.

La radiofréquence est une onde radio qui est transmise par l'air entre un émetteur et un récepteur tous deux présents à l'intérieur de la pièce à main.

L'**action chauffante** augmente la vitesse du flux sanguin, élimine la stagnation des liquides dans les capillaires, libère le tissu interstitiel du liquide œdémateux.

Elle réduit le relâchement cutané avec un **effet lifting et anti-rides immédiat**, en provoquant un **raccourcissement immédiat des fibres de collagène et d'élastine**, en stimulant les fibroblastes à synthétiser du **nouveau collagène "jeune"**.

En outre, il réduit le volume des **glandes sébacées** et **augmente l'hydratation**.

L'application provoque une **agréable sensation de chaleur**.




### PRODUITS RECOMMANDÉS

Effectuer la Radio Fréquence pendant la phase de stimulation, après le nettoyage et l'exfoliation, avant l'application des ampoules et des masques.

Pour toutes les lignes : Echinacea Tech Massage Cream.

## RADIOFREQUENCE : action tonifiante

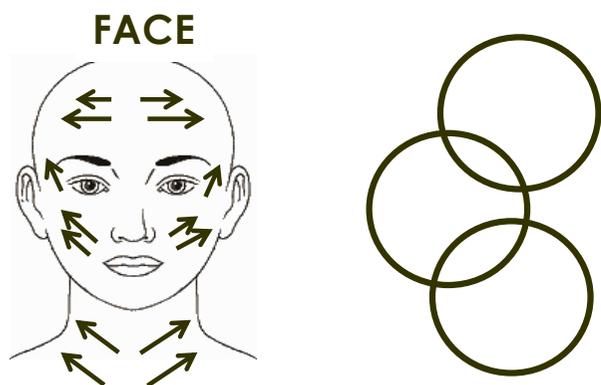

Mouvements circulaires, en suivant les traits musculaires, tant sur le visage que sur le corps. Pour un résultat efficace, il est conseillé de travailler d'abord de façon homogène sur toute la zone à traiter, puis de se concentrer plus longuement sur les parties les plus touchées.

**CONSEILS :** Il est préférable de bien travailler sur une seule zone pendant plus longtemps plutôt que sur plusieurs zones pendant moins longtemps.

PIÈCE À MAIN BIPOLAIRE	Gamme de puissance recommandée entre 50 et 65*.
PIÈCE À MAIN MULTIPOLAIRE (EN OPTION)	Gamme de puissance recommandée entre 50 et 65*.

\*La sensation de chaleur est cependant subjective et nous recommandons donc de toujours commencer par un niveau plus bas (par exemple 45-50) et d'augmenter ensuite la puissance pendant le traitement.

\*Conseillez à la cliente de signaler toute sensation de chaleur excessive à l'esthéticienne, qui pourra alors réduire les niveaux de puissance.

**N.B.:**

CONTRE-INDICATIONS (voir le manuel de l'utilisateur)  
N'oubliez pas de faire signer au client le formulaire de consentement éclairé.

# RADIOFREQUENCE : action tonifiante



**N.B. : Passez toujours l'autre main sur la peau couverte par la pièce à main.**

Pendant l'utilisation, la pièce à main doit rester en mouvement pour éviter les brûlures désagréables dues à la chaleur émise par la radiofréquence.

Tenez toujours la pièce à main perpendiculairement à la peau, en la déplaçant lentement sans trop de pression et en vérifiant qu'il y a toujours une épaisse couche de produit entre la tête de la pièce à main et la peau.

Mouvement lent et circulaire.

La puissance doit être réglée en fonction de la tolérance du client.

**NE PAS DÉPASSER UNE DURÉE TOTALE DE TRAITEMENT DE 30 MINUTES.**

	TEMPS TOTAL	Durée totale du traitement
Tempo Totale 30:00		
Potenza - % 00	POWER -%	Énergie livrée en pourcentage
Azione 3,00	ACTION	Durée en secondes de l'énergie émise (RF)
Pausa 0,00	PAUTILISER	Énergie mise en paUTILISER en secondes (RF)
←	BACK	Permet de revenir à l'écran précédent
↓	MEMORY CARD	Mémorise les données sur la carte
+ -	+ AND -	Pour augmenter et diminuer les paramètres
⊞	STOP	Arrêter ou interrompre un traitement
⏪	START	Pour commencer le traitement

**L'action (temps)** est une mesure de sécurité et ce paramètre ne doit pas être modifié. S'il est abaissé, la chaleur est émise plus rapidement et le client ressent donc plus de chaleur.

**La paUTILISER** est une autre mesure de sécurité et ne doit être utilisée qu'avec les peaux sensibles/couperose pour créer des "paUTILISERS" dans l'émission de chaleur afin que le client ne ressente pas trop de chaleur.

## RADIOFREQUENCE : OPTION

Lors de chaque traitement, nous recommandons d'utiliser les deux pièces à main **BIPOLAR** et **MULTIPOLAR (EN OPTION)** :

La pièce à main **BIPOLAR** réactive le tissu, pour une meilleure oxygénation, stimulant une plus grande élasticité de la peau (plus près de la surface).

La pièce à main **MULTIPOLAR** permet un travail plus précis et détaillé des zones les plus touchées par le problème.

Grâce à sa pénétration plus profonde, il soulève et raffermi les tissus pour une action anti-age.

### NOUVELLE GÉNÉRATION

Il s'agit d'un moyen d'atteindre le résultat de l'analyse dans un endroit bien précis du système à 4 niveaux. Dans ces conditions, les températures élevées peuvent être réexaminées, tant au niveau de la source (40°C) qu'à l'intérieur (43°C jusqu'à 2°C).



MANIPOLO R.F. BIPOLARE



MANIPOLO R.F.  
MULTIPOLAR

# FACE PLUS : pieces a main inUTILISERs



5 CARTE MÉMOIRE



Contrôle de l'hydratation



Pièce à main d'électroporation



Pédale



Scrub brosses



Différentes brosses



Ultrasound 25kHz  
pièce à main



R.F. Bipolar pièce à main

## FACE PLUS: OPTION

### DERNIÈRE GÉNÉRATION

Il présente l'avantage de concentrer le champ d'action en un seul point grâce au système à 4 pôles. De cette façon, il est possible d'obtenir des températures plus élevées aussi bien en surface (40°C) que dans les couches plus profondes (43°C jusqu'à 2 cm).



R.F. MULTIPOLAR  
NO CHROMO

OPTION SUR  
COMMANDE

# ESSENTIAL LINES & FACE PLUS

	REHYDRA	EMOZIONI PLUS	BALANCE
ÉTAPE 1	<b>BRUSHING</b> UTILISER: MOISTURISING CLEANSING MILK	<b>BRUSHING:</b> UTILISER: CLEANSING CREAM	<b>BRUSHING</b> UTILISER: EXFOLIATING GEL
ÉTAPE 2	MOISTURISING TONING LOTION	SOOTHING ESSENCE MIST	<b>ULTRASOUND SPATULA 25KHz</b> UTILISER: EXFOLIATING GEL & REHYDRA MOISTURISING TONING LOTION
ÉTAPE 3	<b>ULTRASOUND SPATULA 25 KHz</b> UTILISER: BAMBOO EXFOLIATING GEL & REHYDRA MOISTURISING TONING LOTION	<b>ULTRASOUND SPATULA 25 KHz</b> UTILISER: ENZYMATIC EXFOLIATOR & ESSENCE MIST	<b>BIPOLAR RADIOFREQUENCY (30')</b> UTILISER: ECHINACEA FACE MASSAGE TECH
ÉTAPE 4	<b>BIPOLAR RADIOFREQUENCY (30')</b> UTILISER: ECHINACEA FACE MASSAGE TECH	<b>BIPOLAR RADIOFREQUENCY (30')</b> UTILISER: ECHINACEA FACE MASSAGE TECH	<b>ELECTOPORATOR</b> UTILISER: VIALS CONCENTRATE & 2.5ML OF REHYDRA MOISTURISING TONING LOTION
ÉTAPE 5	<b>ELECTOPORATOR</b> UTILISER: INTENSIVE MOISTURISING VIAL & 2.5ML OF REHYDRA MOISTURISING TONING LOTION	<b>ELECTOPORATOR</b> UTILISER: FACE CONCENTRATE & 2.5ML OF REHYDRA MOISTURISING TONING LOTION	SPONGY MASK
ÉTAPE 6	MOISTURISING MASK	FACE MASSAGE TUBE	CONCEALER GEL
ÉTAPE 7	EYE CONTOUR CREAM	ANTI-STRESS FACE MASK	MATIFYNG CREAM
ÉTAPE 8	MOISTURISING DAY CREAM	COCOONING CREAM	

# PREVENTION AGE CARE LINES & FACE PLUS

	WHITE MOON	LIME
ÉTAPE 1	<b>BRUSHING</b> UTILISER: CLEANSING TONER	<b>BRUSHING</b> UTILISER: VITAMIN C MICELLAR CLEANSER
ÉTAPE 2	<b>ULTRASOUND SPATULA 25 KHz</b> UTILISER: FIZZY MASK & REHYDRA MOISTURISING TONING LOTION	<b>ELECTOPORATOR</b> UTILISER: ZINC+ORANGE MINERALISER & 2.5ML OF REHYDRA MOISTURISING TONING LOTION
ÉTAPE 3	<b>BIPOLAR RADIOFREQUENCY (30')</b> UTILISER: ECHINACEA FACE MASSAGE TECH	<b>ULTRASOUND SPATULA 25 KHz</b> UTILISER: BAMBOO EXFOLIATING GEL & ZINC+ORANGE
ÉTAPE 4	<b>ELECTOPORATOR</b> UTILISER SMOOTHING CONCENTRATED DROPS & 2.5ML OF REHYDRA MOISTURISING TONING LOTION	<b>BIPOLAR RADIOFREQUENCY (30')</b> UTILISER: ECHINACEA FACE MASSAGE TECH
ÉTAPE 5	BRIGHTENING MINERAL MASK	VITAMIN C FACE MASSAGE
ÉTAPE 6	PROTECTIVE BRIGHTENING EMULSION	VITAMIN C FACE MASK
		VITAMIN C FLUID OR VITAMIN C CREAM

# AGE CARE LINES & FACE PLUS

	DELAY INFINITY	INTENSE	75.15
ÉTAPE 1	<b>BRUSHING</b> UTILISER: CLEANSING MILK	<b>BRUSHING</b> UTILISER: COMPLETE CLEANSER FACE & EYES	<b>BRUSHING</b> UTILISER: CLEANSING CREAM
ÉTAPE 2	TONING LOTION	<b>ULTRASOUND SPATULA</b> 25 KHz UTILISER: EXFOLIATING GEL & REHYDRA MOISTURISING LOTION	<b>ELECTROPORATOR</b> UTILISER: PRECIOUS TONER
ÉTAPE 3	<b>ULTRASOUND SPATULA</b> 25 KHz UTILISER: BAMBOO EXFOLIATING GEL & TONING LOTION	<b>BIPOLAR RADIOFREQUENCY</b> UTILISER: ECHINACEA FACE MASSAGE TECH	<b>ULTRASOUND SPATULA</b> 25KHz UTILISER: FACE SCRUB & PRECIOUS TONER
ÉTAPE 4	<b>BIPOLAR RADIOFREQUENCY</b> UTILISER: ECHINACEA FACE MASSAGE TECH	DEEP FACIAL MASSAGE	<b>BIPOLAR RADIOFREQUENCY</b> UTILISER: ECHINACEA FACE MASSAGE TECH
ÉTAPE 5	FACE MASSAGE VIAL	<b>ELECTROPORATOR</b> UTILISER: SCHOCK CONCENTRATE & REHYDRA MOISTURISING LOTION	GEL LIKE MASK
ÉTAPE 6	FACE MASK	SENSITIVE ZONE MASK T ZONE MASK	INTENSIVE EYE CONTOUR
ÉTAPE 7	<b>ELECTOPORATOR</b> UTILISER: FLAWLESS FACE VIAL & 2.5ML OF TONING LOTION		SMOOTHING DAY CREAM
ÉTAPE 8	EYE AND LIP CONTOUR CREAM		
ÉTAPE 9	DAY CREAM		

## CE TECHNICAL CHARACTERISTICS

MANUFACTURER	TECHNOLOGY SRL VIA GARGANO N 7-B 20139 MILANO Tel. 0039 02 57303118 Fax. 0039 02 533174
MODEL: NAME:	VAG.1109 VGH FACE PLUS
POWER SUPPLY:	From single-phase 230 V $\square$ 10% 50/60Hz, via plug / socket with protective conductor.
Absorbed power:	170 VA
External protection:	 2 FUSES T 1,6 A -250 V
<b><u>OUTPUT POWER:</u></b>	
Scrub brushes	24 v.cc 1,3 a n° 315 RPM
Ultrasound 25khz	frequency 25 khz +/- 10% mechanical oscillation 30 micron pp +/- 20% power 9w
Electroporation (electro stimulation)	electrical pulse generator max.27ma current on 2 plates 0,3 ma/ cm <sup>2</sup>
Radio frequency	10 watt 450 khz $\pm$ 10 % 1hz -500 hz (square wave) 1hz -500 hz (square wave)
Ionophoresi (constant current)	24 v.cc max.4ma < 0,9 ma /cm <sup>2</sup> (square wave) on the 2 electrodes supplied
Ultrasound 25kHz	frequency 25 khz +/- 10% mechanical oscillation 30 micron pp +/- 20% power 9w
Classification:	CLASS I
Physiological effects:	SEE MANUAL

### A.P.E. APPARECCHIATURA PROFESSIONALE PER ESTETICA

#### ENVIRONMENTAL OPERATING CHARACTERISTICS:

environmental temperature:	$\pm +10^{\circ}\text{C}$ A $\pm +35^{\circ}\text{C}$
humidity:	from 30 a 75%
atmospheric pressure:	from 700 a 1060 hPa

#### TRASPORT AND STORAGE:

temperature:	$-10^{\circ}\text{C}$ A $\pm +50^{\circ}\text{C}$
humidity:	from 10 a 80%
atmospheric pressure:	from 600 a 1060 hPa
DIMENSIONS:	L 495 mm x P 495 mm x H 1008mm 45 Kg

NOTE: The manufacturer reserves the right to make alterations to the equipment described in this manual at any time and without prior notice.

The equipment has been programmed and projected to have results on aesthetic imperfections without overpass the allowed aesthetic limit

www.tuv.com  
ID 9105082302



**ISO 9001:2015**

Rappresenta la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità, riconosciuta a livello internazionale, garantisce che le apparecchiature rispettino il sistema di gestione previsto dalla norma per la progettazione, la produzione, la vendita, lo sviluppo e la ricerca.

www.tuv.com  
ID 9105082302



**EN ISO 13485:2012**

La certificazione relativa al Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi Medici, è uno standard di riferimento di Qualità nell'ambito delle procedure regolamentari che disciplinano la progettazione, la produzione e l'immissione in commercio dei Dispositivi Medici.

www.tuv.com  
ID 9105082302



**OHSAS 18001:2007**

Relativa allo standard per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.

VAGHEGGI  
PHYTOSMETICI



VGH FACE PLUS